


Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda juhised, et tagada toote ohutu kasutamine. Kasutamine, mis ei vasta kasutusjuhendile, võib muuta garantii kehtetuks. Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Hoidke juhend alles ka hilisemaks kasutamiseks. Toode on mõeldud ainult kodukasutajale ega sobi kaubanduslikult kasutamiseks.

Ravimidosaaatorile kehtib piiratud üheaastane garantii. Katvusele kehtivad piirangud ja välistused. Vaadake lisainfot garantiihelelt.

Ohutusnõuanded ja ettevaatusabinõud:

- Ärge laske lastel seda seadet kasutada ega sellega mängida.
- Ärge kasutage lisaseadmeid, mis ei ole komplektis või tootja poolt soovitatud.
- Ärge asetage seadet lahtise tule või soojusallikate lähedusse. Võib tekkida tulekahju, elektrilöök, toote kahjustus või vigastus.
- Hoidke ravimidosaaatorit kindlal, tasasel ja stabiilsel pinnal. Ärge pöörake seda tagurpidi välja arvatud juhul, kui te võtate ravimi välja. Pange tähele, et sisemine ravimikonteiner on eemaldatav, selleks et seda oleks lihtne täita.
- Olge ettevaatlik, et ravimidosaaator maha ei kukuks, kuna see võib toodet või selle sees olevaid ravimeid kahjustada.
- Vesi võib kahjustada dosaatorit, põhjustada probleeme patareidega või muul viisil kahjustada sees olevat ravimit. Ärge pange toodet vette ega jätke seda vedelike lähedusse, mis võivad sellele pritsida. Ärge asetage seda keskkonda, kus on kõrge niiskustase.
- Enne sisemise ravimikonteineri täitmist, veenduge et see on täiesti kuiv.
- Ärge kunagi avage katet jõuga.
- Ärge kunagi kasutage valesid patareisid või patareisid, mille ümbris on rebenenud või mingil viisil kahjustatud.
- Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.
- Ravimite õige organiseerimine ning koguste ja kellaegade määramine on kasutaja ja/või tema hooldaja või arsti ainuvastutus. DoseControl ega ravimidosaaatori levitaja ei vastuta vahelejäänud ravimite eest.
- Kui teil jääb annus mingil põhjusel vahele, võtke ühendust oma oma hooldaja, arsti või apteekriga ning järgige teile antud juhiseid.

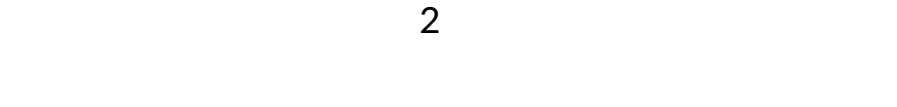


12-tunnise/24-tunnise režiimi valimine

- Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK kaks (2) sekundit all, et vahetada 12 ja 24 tunni režiimi vahel.



Kellaaja määramine

- Kellaaja seadistamise alustamiseks vajutage üks kord nuppu CLOCK.
- Tundide reguleerimiseks vajutage nuppu + või -. Seejärel vajutage minuti reguleerimiseks üks kord nuppu CLOCK.

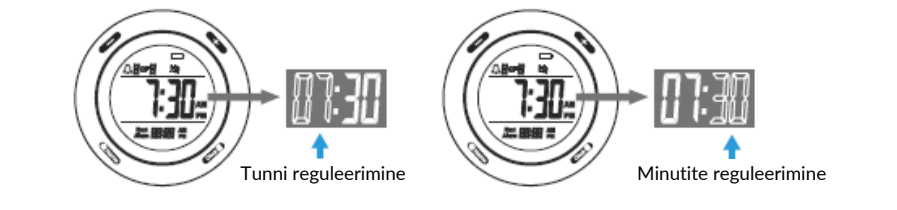

- Kasutage + või - nuppu, et reguleerida minuiteid sarnaselt tunniga. MÄRKUS: + või -nupu vajutamine ja all hoidmine muudab tundide või minutite numbreid kiiremini.
- Vajutage nuppu CLOCK, et väljuda kellaaja seadistusest ja salvestada muudatused. Või vajutage ja hoidke nuppu CLOCK kaks (2) sekundit all, et tühistada muutmine ja väljuda kellaaja seadistusest. MÄRKUS. Ekraanil olevad numbrid vilguvad, et näidata, milliseid numbreid parajasti muudetakse.
- Alarmi seadistamine


- Alarmi seadistamise alustamiseks vajutage nuppu "ALARMS".
- Vajutage nuppu "+" või "-", et valida alarmi vahel, seejärel vajutage kinnitamiseks "ALARMS".
- Tundide reguleerimiseks vajutage "+" või "-". Seejärel vajutage nuppu "ALARMS" tunni kinnitamiseks ja minuti määramiseks.




7

- Kui teil jääb annus mingil põhjusel vahele, võtke ühendust oma oma hooldaja, arsti või apteekriga ning järgige teile antud juhiseid.
 - Mõnda ravimit tuleb hoida tihedalt suletuna ja vältida kokkupuudet õhuga.
- Kui te pole kindel, kas antud ravimidosaaator sobib teie ravimite säilitamiseks, pidage nõu oma tervishoiuteenuse arsti või apteekriga.
- Aku tühenemise korral kuvatakse LCD ekraani paremas ülانurgas aku tühenemise sümbol . Kindlasti vahetage patareid esimesel võimalusel, et tagada ravimidosaaatori nõuetekohane töö.

Pakendi sisu

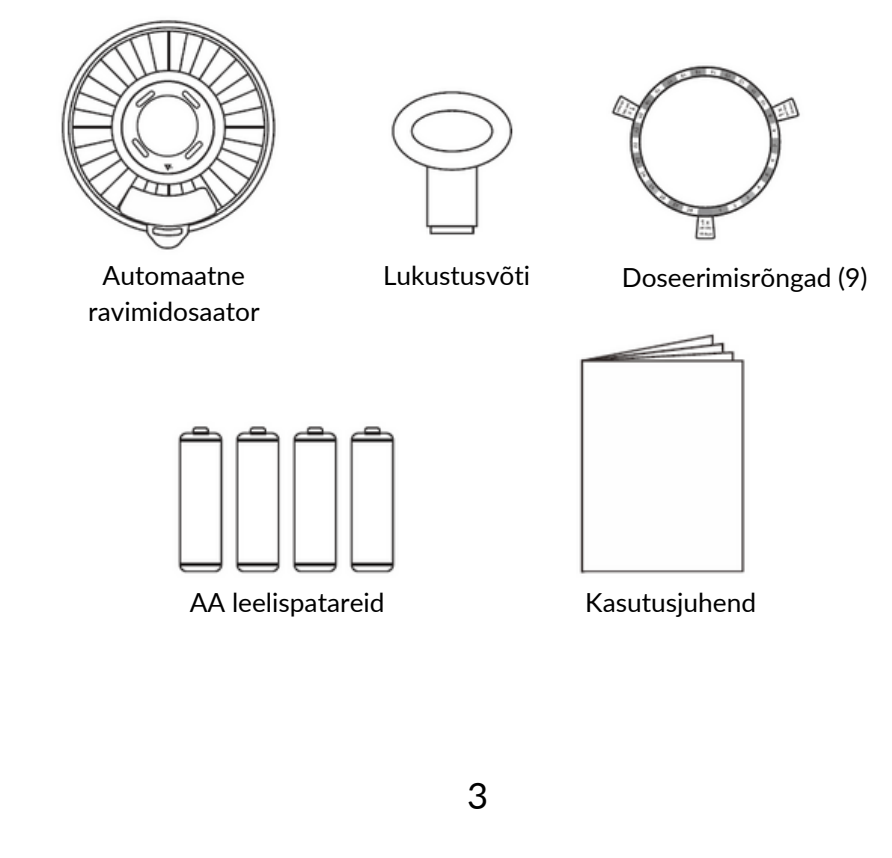

- Vajutage "+" või "-" nuppu, et reguleerida minuiteid, sarnaselt tundidega. MÄRKUS. Nupu + või - all hoidmine muudab tundide või minutite numbreid kiiremini. Ekraanil olevad numbrid hakkavad vilkuma, et näidat milliseid numbreid parajasti muudetakse.
- Vajutage üks kord nuppu "ALARMS" või vajutage ja hoidke kaks (2) sekundit all nuppu "ALARMS", et salvestada soovitud häireseaded ja väljuda häire seadistusrežiimist. Seadistuste muudatuste tühistamiseks oodake mõni sekund, kuni äratuse seadistusrežiim automaatselt lõpeb. Praeguste äratusseadete kustutamiseks vajutage ja hoidke äratuse seadistusrežiimis nuppu CLOCK, kuni ekraanile kuvatakse  .

Alarmitooni ja helitugevuse seadistamine


- Alarmitoonide valimiseks vajutage ja hoidke nuppu + kolm (3) sekundit all. Alarmitooni tähistab A, B või C, mis kuvatakse ekraanil.
- Vajutage ja hoidke nuppu "-" kolm (3) sekundit all, et valida erinevate helitugevustasemetel vahel. Helitugevust tähistab kõlari sümbol, mis kuvatakse ekraanil.


Kolmel alarmitoonil on erinevad piiksusagedused:
Alarm A: pidev piiks, mis kostub 20 sekundit. Pärast seda piiks peatub 10 sekundiks, seejärel hakkab uuesti ja jätkab selles tsüklis.
Alarm B: on kolm (3) helisarja, kus igas sarjas on kolm (3) helisignaali. Piiks peatub seitsmeks (7) sekundiks, seejärel hakkab piiksuma ja jätkub selles tsüklis.
Alarm C: Iga kolme (3) sekundi järel kostab üks (1) piiks.

MÄRKUS. Kõik alarmitoonide tüübid piiksuvad oma vastava segadusega 30 minutit enne peatumist. Samuti kostavad kõik alarmid sama alarmitooniga, mis oli seatud, kuni seda käsitsi teisele toonile ei muudeta.



Toote ülevaade

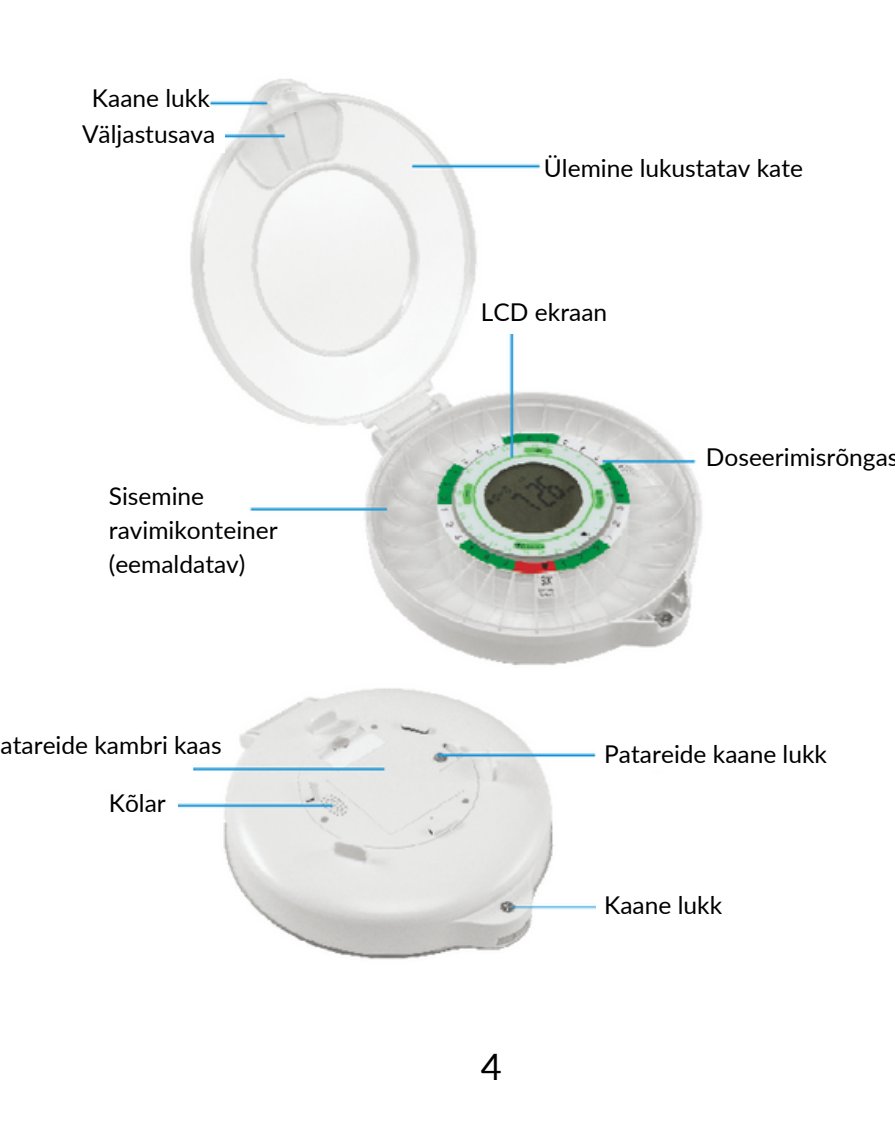

- Vajutage "+" või "-" nuppu, et reguleerida minuiteid, sarnaselt tundidega. MÄRKUS. Nupu + või - all hoidmine muudab tundide või minutite numbreid kiiremini. Ekraanil olevad numbrid hakkavad vilkuma, et näidat milliseid numbreid parajasti muudetakse.
- Vajutage üks kord nuppu "ALARMS" või vajutage ja hoidke kaks (2) sekundit all nuppu "ALARMS", et salvestada soovitud häireseaded ja väljuda häire seadistusrežiimist. Seadistuste muudatuste tühistamiseks oodake mõni sekund, kuni äratuse seadistusrežiim automaatselt lõpeb. Praeguste äratusseadete kustutamiseks vajutage ja hoidke äratuse seadistusrežiimis nuppu CLOCK, kuni ekraanile kuvatakse  .

Lähtestage kõik seaded


- Kõikide sätete kustutamiseks ja lähtestamiseks vajutage ja hoidke korraga viis (5) sekundit all nuppe CLOCK ja ALARMS.

Aktiveerige tehase testimisrežiim

- Tehase testimise režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke korraga viis (5) sekundit all nuppe + ja -. Tehase testimisrežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke kolm (3) sekundit all nuppu CLOCK.

Ravimidosaaatori kasutamine


- Valige igapäevane doseerimisrõngas, mis vastab teie vajadustele (vt "Doseerimisrõngaste mõte" lk 5).
- Asetage igapäevane doseerimisrõngas sisemise ravimikonteineri keskele ja asetage oma ravimid pessa vastavalt nende võtmise ajale (1., 2., 3. jne), mida tähistavad rõngal olevad numbrid (1, 2, 3 jne). Ärge asetage ravimeid punastesse sektsioonidesse. Kui näete väljastusaval lähenemas punast, on aeg konteiner uuesti täita.
- Paigaldage patareid (vt Patareide paigaldamine lk 7).
- Avage kaas võtme abil (vt jaotist Kaane lukustamine ja avamine lk 7) ja asetage sisemine ravimikonteiner põhikorpuse sisse.
- Seadistage kellaag (vt Kellaaja määramine lk 8).
- Reguleerige äratuse helitugevust, äratuse helinaid ja valige 12- või 24-tunnine aeg (vt Alarmide helitugevuse seadistamine ja 12-tunnise/24-tunnise režiimi valimine).
- Määrake oma raviajad (vt Alarmide seadistamine lk 9).
- Sulgege kaas ja lukustage see kaasasoleva võtmega (vt jaotist Kaane lukustamine ja avamine lk 7).
- Määratud ravimi võtmise aegadel kuulete alarmi.
- Avage väljastusava, lükates väljastusava kaant paremale.
- Kallutage ravimidosaaatorit allapoole, et kukutada ravim kätte või ravimitopsi. Kontrollige, kas kõik tabletid on sektsioonist välja tulnud. Äratus peaks automaatselt peatuma.
- Sulgege väljastusava ja asetage ravimidosaaator tasasele pinnale.

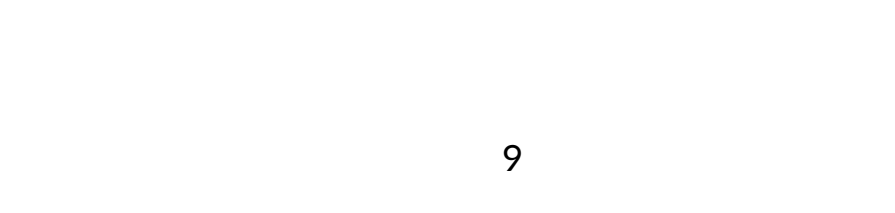


9

Doseerimisrõngaste mõte

Ravimidosaaatoril on 9 erinevat rõngast, mis vastavad sellele, mitu korda päevas on vaja ravimeid väljastada. Rõngad on loodud selleks, et aidata teil ravimit sisemise ravimikonteineri panna nii, et see oleks õigesti doseeritud. Sisemises ravimikonteineris on 28 lahtrit ravimite jaoks.

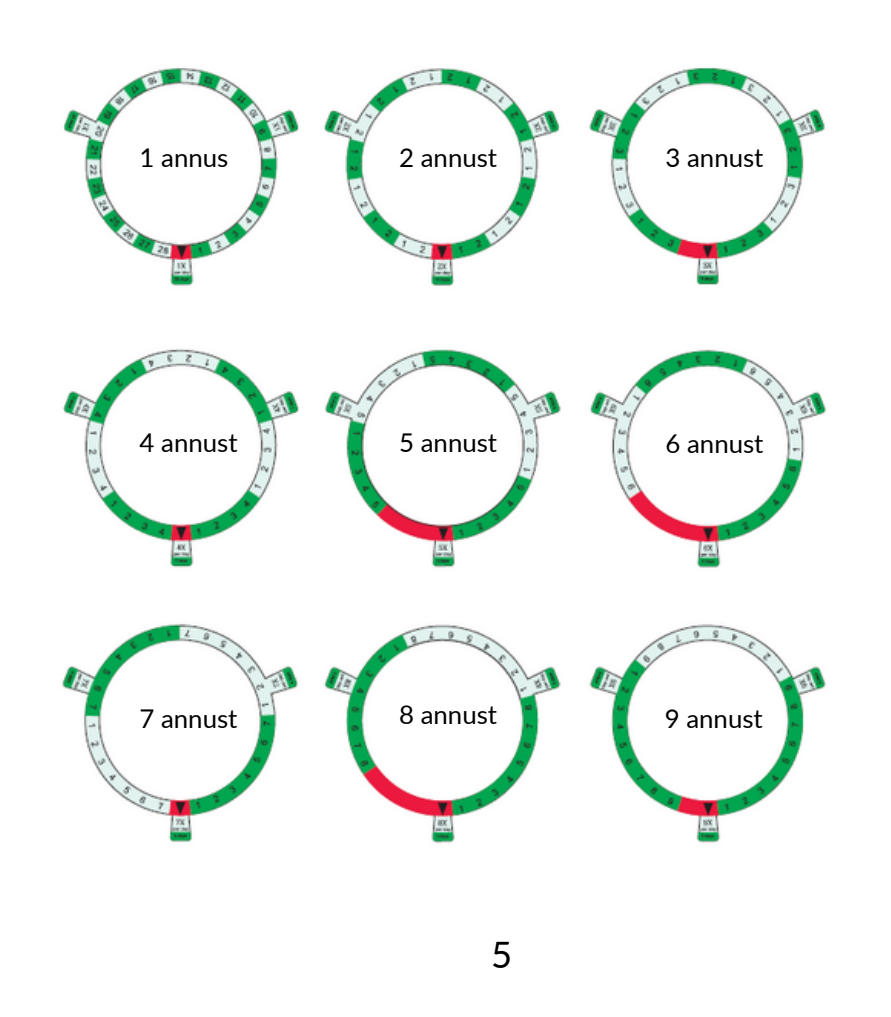



- Vajutage "+" või "-" nuppu, et reguleerida minuiteid, sarnaselt tundidega. MÄRKUS. Nupu + või - all hoidmine muudab tundide või minutite numbreid kiiremini. Ekraanil olevad numbrid hakkavad vilkuma, et näidat milliseid numbreid parajasti muudetakse.
- Vajutage üks kord nuppu "ALARMS" või vajutage ja hoidke kaks (2) sekundit all nuppu "ALARMS", et salvestada soovitud häireseaded ja väljuda häire seadistusrežiimist. Seadistuste muudatuste tühistamiseks oodake mõni sekund, kuni äratuse seadistusrežiim automaatselt lõpeb. Praeguste äratusseadete kustutamiseks vajutage ja hoidke äratuse seadistusrežiimis nuppu CLOCK, kuni ekraanile kuvatakse  .

Hooldus

- Pühkige välispinda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Vajadusel eemaldage sisemine ravimikonteiner ja pühkige üksikult pesad ettevaatlikult. Laste konteineril enne selle asendamist või uuesti täitmist täielikult kuivada.
- Ärge pange toodet vette ega jätke seda vedelike lähedusse, mis võivad sellele pritsida.
- Enne sisemise ravimikonteineri täitmist, veenduge et see on täiesti puhas ja kuiv.

Tehnilised andmed

- Toide: 4x AA leelispatareid (kaasas)

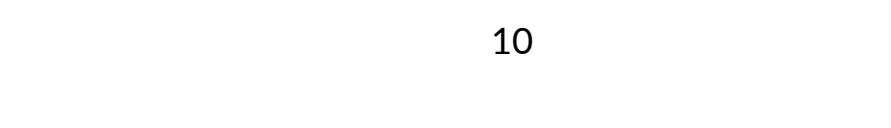


Doseerimisrõngas tuleb esmalt paigutada sisemise anuma keskele, nii et lipik on suunaga all (plastkonteineril olev ▼tähis). Joondage kaks kolmnurga tähist annustamisrõngal ja esiplaadil, seejärel keerake lipikud alla, kinnitage doseerimisrõngas oma kohale, enne kui hakkate dosaatorit ravimitega täitma. Kui doseerimisrõngas on õigesti paigutatud, aitavad erinevad lahtrite värvid päevi eristada. Näiteks kui kasutate rõngast 2x Per Day (2x päevas) (ravimeid tuleb väljastada ainult kahel erineval ajal päevas), siis see mahutab 14 ravimit. Rohelised numbrid näitavad esimese päeva ravimeid. Valged on järgmise päeva ravimid. Värvid vahelduvad, et päevad segi ei läheks. 1-ga tähistatud lahter on koht, kuhu asetate selle päeva esimese annuse, 2-ga tähistatud lahter on koht, kuhu asetate päeva teise väljastavate ravimite annuse jne. Ravimikonteiner peaks mahutama kõik vajalikud ravimid ühte pessa.



ÄRGE PANGE RAVIMEID PESSA, MIS ON TÄHISTATUD PUNASEGA. Need lahtrid näitavad järelejäänud aega. Näiteks kui vajate päeva jooksul viiel erineval ajal väljastatavat ravimit, mahub rõngasse 5 päeva ehk 25 korra ravimid. Kolm pesa jääb üle. Need allesjäänud pilud on tähistatud punase rõngaga ja seetõttu on 5x päevas ja 6x päevas rõngastel oluliselt suuremad punased alad. Ärge pange ravimeid nendesse pesadesse.

Igapäevaste doseerimisrõngaste kasutamiseks valige rõngas, mille lipik näitab õigesti, mitu korda päevas on vaja ravimeid väljastada. Asetage rõngas ümber sektsiooni. Täitke iga sektsioon vastavalt ja asetage karussell koos doseerimisrõngaga dosaatorisse tagasi.

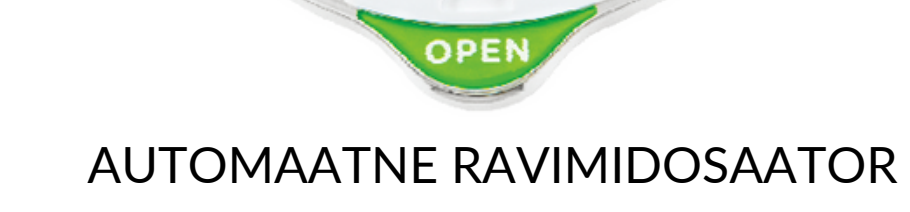

6