

# SOS-kõne

Hea kasutaja, kui sa:



Tunned ennast halvasti



Vajad abi



Oled ohus

## SIIS VAJUTA JA HOIA ALL SOS-NUPPU

### Mis juhtub edasi?

1. Kuuled hääljulist "SOS-sõnumi saatmine".
2. SOS-nupp muutub **punaseks**.
3. Tekib häälihendus hooldajaga.

Juhul, kui sa ei kuule "SOS-sõnumi saatmine" ja ei näe punast valgust, siis vajuta ja hoia all **SOS-nupp** uuesti






### PEA MEELES:

Häirenuppu peab kandma kogu aeg. Eemaldage see ainult pesemiseks või laadimiseks.

### Häirenupu valgus- ja helisignaalid

Pea meeles, et häirenupp genereerib valgus- ja helisignaale vastavalt hetkeolekule.

-  Vilkuv roheline tuli näitab, et seade töötab korralikult.
-  Vilkuv punane tuli näitab aku madalat taset
-  Pidev punane tuli näitab, et SOS-nupp on aktiveeritud

### Häirenupul kõnedele vastamine

Kui SOS-nupp muutub valgeks ja seadmest kõlab melodiasignaal, siis see tähendab, et hooldaja helistab sulle.

Kõnele vastamiseks hoia SOS nuppu all, kuni valge tuli kaob ja meloodia peatub, siis saad rääkida.




**Enne rikkest teatamist kontrolli**, kas häirenupp:

on puhaste anduritega • töötab laadimise ajal korrektselt • reageerib korralikult hädaabikõnedele

# Laadimisjuhend

## 1. Pane laadija kokku ja ühenda see vooluvõrku

- ühenda USB-kaabel laadijaalusega
- USB augu leiad laadijaaluse küljelt

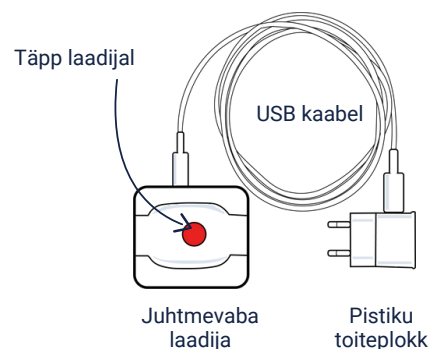


## 2. Aseta häirenupp laadimisalusele

- häirenupul allosas olev täpp peab ühtima laadimisaluse täpiga




## 3. Laadimine

- 30 sekundi pärast muutub SOS-nupp roheliseks ja punaseks
- laadimine võtab aega umbes 3 tundi
- kui 30 sekundi pärast ei sütti ükski LED, siis kontrolli seadme asendit veel kord
- kui häirenupul pole valgussignaali, oota umbes 20 minutit, seejärel vajuta ja hoida SOS-nuppu umbes 5 sekundit all – seade peaks sisse lülituma

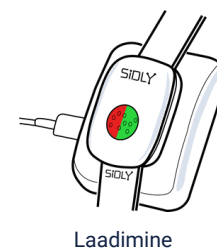

## 4. Häirenupp on laetud

- seade teavitab sind aku täislaadimisest hääljuhisega "aku on täielikult laetud"
- SOS-nupp muutub roheliseks

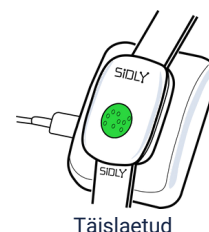

## 5. Häirenupp on kandmiseks valmis

- eemalda häirenupp laadijalt, nüüd on see kasutamiseks valmis
- kui seade on väga soe, oota hetk enne selle peale panemist