

Häiresüsteem dementsusega inimestele



**KASUTUSJUHEND  
HOOLDAJATELE**

**otiom<sup>®</sup>**

# Sisukord



● Icoonide ja nuppude tähendused	1
Otiom häirenupu 3 taset	1
Kaardi funktsioonid	1
Aku tasemed	1
● Laadimine	2
● Ohutustasemed	3
● Turvatsoon	4
● Lisad ja muudatused	5
Lisa kodubaas	5
Lisa häirenupp	5
Kuidas muuta Otiomi häirenupu kasutaja nime	5
● Otiom häirenupp häireseisundis	6
Häireteade on saabunud	6
Kinnita, et saad aidata	6
Mis juhtub, kui keegi ei saa aidata?	6
● Leia inimene Otiomi rakendusega (häire aktiveeritud)	7
● Leia inimene Otiomi rakendusega (väljaspool turvatsooni)	10
● Leia vajadusel inimene hooldusasutuses	12

# Ikoonide tähendused



## Otiom häirenupu 3 taset



Kodu: Otiomi nupp asub kodus, määratletud Otiomi kodubaasiga (baasidega). See on tähistatud rohelise ringiga.



Väljaspool: Otiomi nupp asub kodubaasi ulatusest väljas, kuid siiski turvatsoonis. Seda tähistab kollane ring ja triip. Teavituse saamine nutitelefonil on võimalik, kui Otiomi nupp on turvatsoonis.



Häire: Otiomi nupp on väljaspool turvatsooni, seega on vaja aidata dementsusega inimesel koju naasta. Seda tähistab punane ring ja triip.

## Kaardi funktsioonid



Asukoht: kaardifunktsioonis kuvatakse Otiomi nupu asukoht. Värvid tähistavad sama, mida on kirjeldatud Otiomi nupu kolme etapi puhul.



Varasemad asukohad: Otiomi nupu varasemad asukohad näitavad liikumissuunda. Kaardil kuvatakse korraga 0-4 punkti.



Info: leia lisainfot kaardil navigeerimise ja ikoonide tähenduste kohta.



Vali satelliitvaate ja lihtsa kaardikuva vahel.



Keskkoht: aseta kaart automaatselt sinise täpi (telefon, millega otsid inimest) kohale.

## Aku tasemed



Täielikult laetud



Madal aku tase



Kõrge aku tase



Aku on tühi




Keskmine aku tase

# Laadimine




## Otiom häirenupu laadimine

Otiomi nupp võib häireolekuta vastu pidada mitu nädalat laadimiste vahel. Rakenduses näed Otiomi nupu aku taset (1). Kui Otiomi nupp vajab laadimist, saadetakse teade. See on meeldetuletus, et nupp vajab laadimist. Oluline: teade saadetakse, kui Otiomi nupu akul on jäänud umbes 30% võimsust. Palun järgi sõnumit ja laadi seadet, et tagada Otiomi nupu piisav võimsus häiresituatsioonide jaoks. Siiski võib nupp häireolekus töötada veel mõned tunnid ka siis, kui inimene lahkub kohe pärast teate saamist.

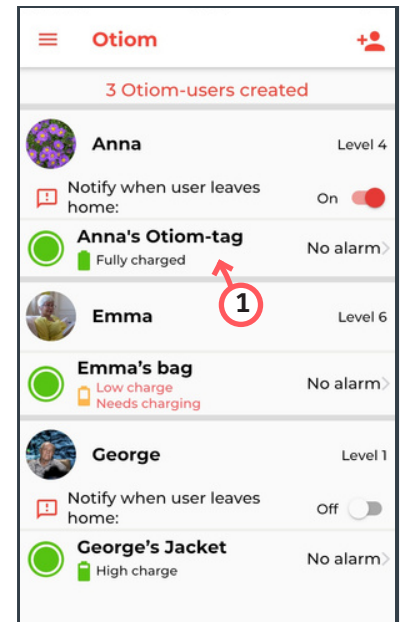

## Laadimisalus

Otiomi nupp laetakse juhtmevabalt, asetades see laadijale pärast selle ühendamist vooluvõrku. Otiomi nupp tuleb asetada laadija keskele. Nupp on õigesti paigutatud, kui laadija kiirgab ühtlast sinist valgust (2). Kui seade on laetud, muutub see valgus roheliseks. Märkus: Kui Otiomi nupp on laadijale valesti asetatud, ei sütti ega vilgu laadija valgus. Teie laadija välimus võib varieeruda. Parempoolsetel piltidel on näha kaks võimalikku varianti.

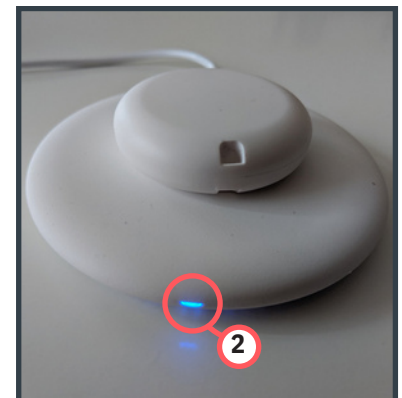

**Roheline tuli:** Otiom häirenupp on täielikult laetud.



**Sinine tuli:** Otiomi häirenupp veel laeb.

# Ohutustasemed



## ● Kuidas kasutada ohutustasemeid?

Erinevad ohutustasemed on loodud selleks, et kohandada häirenuppu vastavalt isiku igapäevaelule. Need seadistatakse menüüpunkti "Ohutustase" alt, mis asub Otiomi kasutajamenüüs. Aeg erinevatel tasemetel on eelnevalt määratud.

**Tase 1: Manuaalne häire.** Administraator või abistaja saab manuaalselt häire käivitada, kui on vaja isikut leida.

**Tase 2:** 6 tundi liikumist ilma jälgimiseta.


**Tase 3:** 3 tundi liikumist ilma jälgimiseta turvatsooni sees.

**Tase 4:** 1 tund liikumist ilma jälgimiseta turvatsooni sees.

**Tase 5:** Otiomi kasutaja peab alati jääma turvatsooni. Siiski tuleb nupp vähemalt kord päevas kodubaasi juurde tagasi tuua.

**Tase 6:** Häire aktiveerub kohe, kui Otiomi kasutaja lahkub kodust (kodubaasi ulatusest). Kui kasutaja lahkub turvatsoonist, käivitub häire.

**Tasemetel 1-5** on võimalik saada teavitusi, kui kasutaja lahkub kodust, kuid jääb siiski turvatsooni.

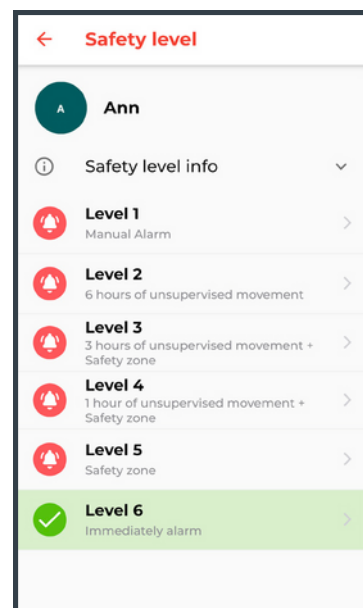

## ● Kuidas muuta turvataset?

*Otiomi kasutaja nimi* → *Ohutustase*

# Turvatsioon



## Mis on turvatsoon?


Turvatsioon on välistingimustes ala, kus inimesel on ohutu, kas püsivalt või ajaliselt piiratud perioodiks. Turvatsooniks võib olla näiteks aed või igapäevane teekond, kus Otiomi kasutaja regulaarselt üksi jalutab, ilma probleemideta.

## Kuidas seada turvatsooni?

Otiomi kasutaja nimi → Ohutustase →

Vali turvatase 3, 4 or 5. → Konfigureeri turvatsooni

Kaardil suumimiseks kasuta kahte sõrme. Kui puudutad ühte ikooni kaheks sekundiks, saad seda liigutada (1). Ikoone saab liigutada ainult ükshaaval. Kui turvapiirkond on õigesti paigutatud, klõpsa "Salvesta".


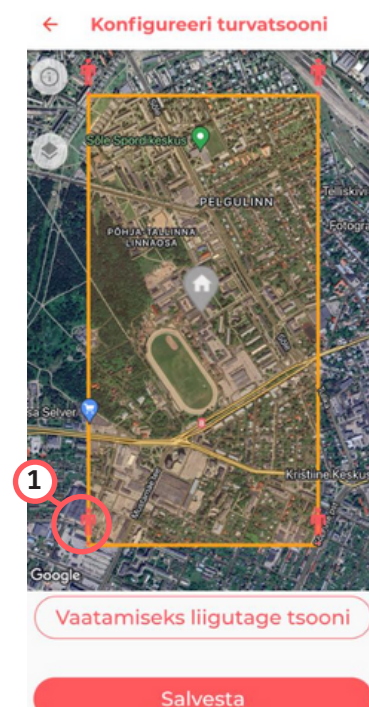


# Lisad ja muudatused

## Lisa kodubaas

Admin Menüü → Redigeeri Otiom-Base'i → Lisage Otiom Base

Oma Otiomi kodubaasi tagaküljel leiad kodubaasi ID, mis koosneb neljast märgist (2). Klõpsa rakenduses vastavale ID numbrile (3). Rakenduses pead ise kodubaasi kaardile paigutama. Samuti tuleb kodubaas füüsiliselt asetada katvust vajava ala kesksele kohale, näiteks elaniku tuppa hooldekodus või kööki kodus.

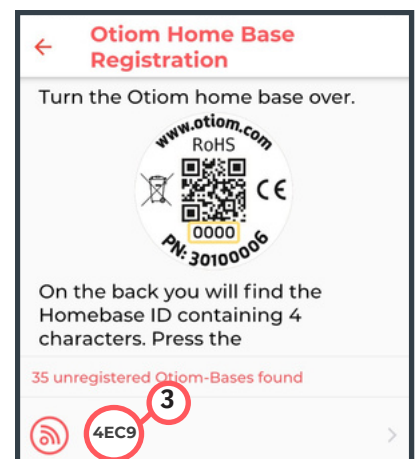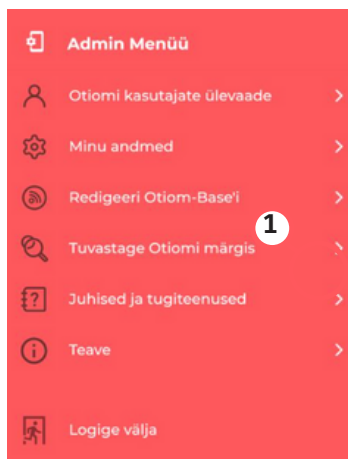

## Lisa häirenupu lisamine

Otiomi kasutaja nimi → Hallake Otiomi märgist

→ Lisage uus Otiomi märgis

Aseta häirenupp laadimisalusele ning veendu, et nutiseadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud.

Kui häirenupp on laadimisalusele õigesti asetatud, hakkab vilkuma sinine või roheline valgus.

**Sinine** tähendab, et häirenupp veel laeb.

**Roheline** tähendab, et häirenupp on täielikult laetud.

Vajuta "ühenda häirenupp" kui oled nupu laadimisalusele asetanud.

Saad sõnumi, mis teavitab sind, et nupp on võrku ühendatud, ja et pead nupu viima õue (rohkem kui 100 meetri kaugusele kodubaasist). Seejärel saad teise sõnumi, mis ütleb "palju õnne".



## Kuidas muuta Otiomi häirenupu kasutaja nime?

Otiom häirenupu kasutaja nimi → Kliki nimel



# Otiom häirenupp häireseisundis



## Häireteade on saabunud



Kui seatud turvatase on ületatud, saad teate, mis näitab, et Otiomi häire on käivitunud. Saad seda sõnumit näha parempoolsel pildil.

## Kinnita, et saad aidata

Kui häire on aktiveeritud, pead kinnitama, kas saad aidata või mitte. Kui kinnitad, et saad aidata, kuvatakse sulle kaart, mis näitab Otiomi nupu asukohta.

## Mis juhtub, kui keegi ei saa aidata?

Otiomi rakendus saadab häireteateid seni, kuni keegi kinnitab, et nad aitavad inimest leida.

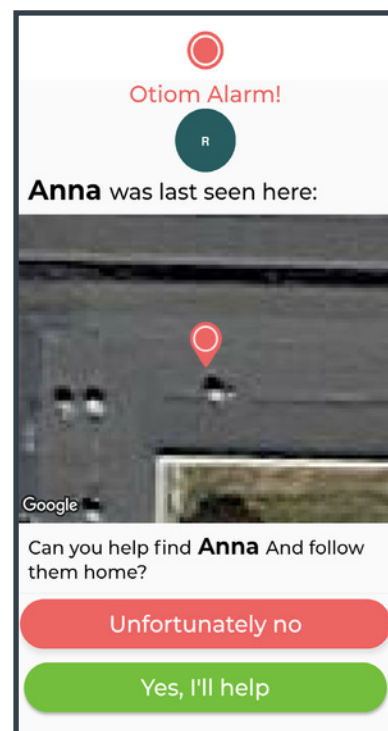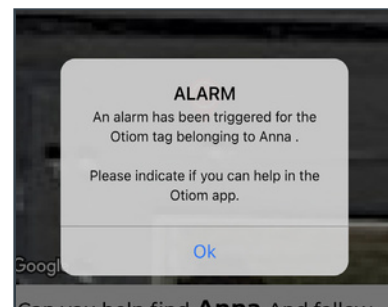




# Leia inimene Otiomi rakendusega (häire aktiveeritud)

## Leia inimene üles


Rakenduses kuvatakse punane osuti (1) koos jäljega (2). Punane osuti näitab, kus Otiomi nuppu viimati “nähti”. Hallid osutid näitavad varasemaid asukohti, mis võivad aidata aimu saada inimese liikumissuuna kohta. Sinine täpp (3) näitab sinu nutitelefonis/ sinu asukohta.

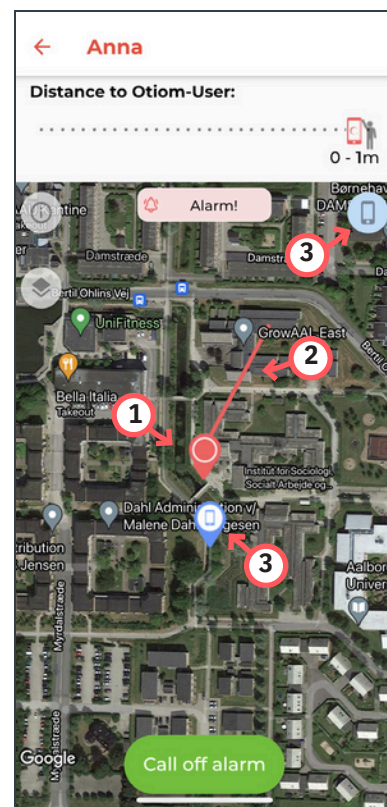

## Vali kaardivaade

Paremaks orienteerumiseks saad valida kahe kaardivaate vahel - tavaline kaardikuva tänavatega või satelliitvaade.



Seda saad teha, klõpsates ikoonile (4), mis on märgitud satelliitkaardil.

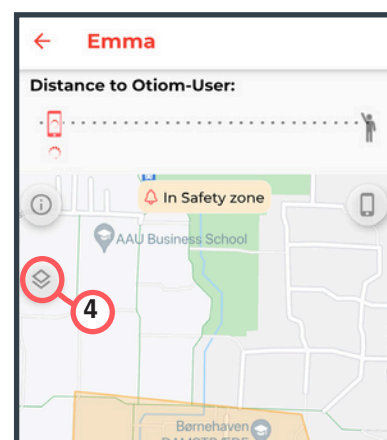

## Vahemaa möõtmine Otiomi häirenupu kasutajani




Lähedusandur näitab kaugust sinu ja Otiomi kasutaja vahel (2). Selle ulatus on kuni 10 km. Kui nutitelefon ja nupp on teineteisele lähedal, on alati võimalik näha, kui kaugel nupp on. Kui oled rohkem kui 10 km kaugusel, kuvatakse lihtsalt "+10 km". Asukohateateid saad ainult siis, kui Otiomi nupu olek on "Väljaspool kodu, turvatsoonis" või "Häire" aktiveeritud (3). Oleku "Väljaspool kodu, turvatsoonis" korral saad väga vähe asukohateateid ja järgmise punkti saamiseks võib kuluda kaua aega, sest Otiom ei jälgi pidevalt.

Lähedusandurit saab kasutada ka kadunud nupu leidmiseks, eeldusel, et nupul on veel volu. Nupp "Aktiveeri häire" muutub nähtavaks ainult siis, kui olek on "Väljaspool kodu, turvapiirkonnas", ja seda saab kasutada Otiomi kasutaja asukoha leidmiseks (4). Loe rohkem manuaalse häire kohta leheküljelt 11.

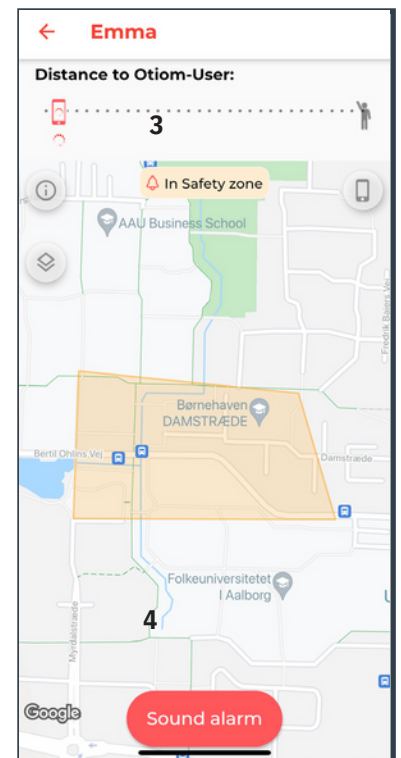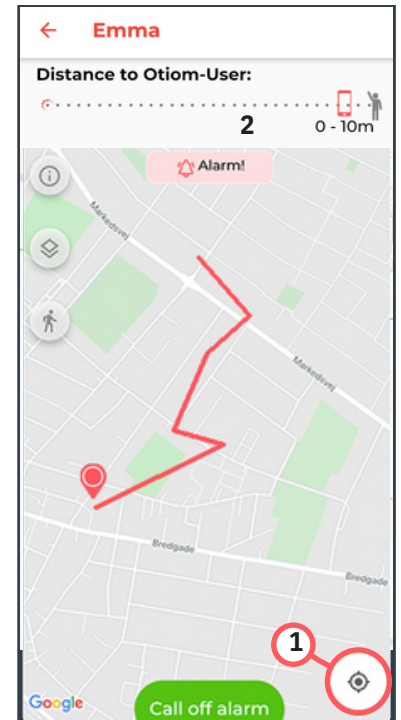

## Häire tühistamine

Häire saab tühistada käsitsi või see võib automaatselt kinni minna. Häire tühistatakse, kui inimene on naasnud hooldekodusse/asutusse ja Otiomi nupp on jälle Otiomi kodubaasi ulatuses. Allolevad pildid kirjeldavad, kuidas saad häire ise tühistada. Kõik abistajad saavad teate, et häire on tühistatud, et nad teaksid, et inimene on leitud (vaata sõnumit).

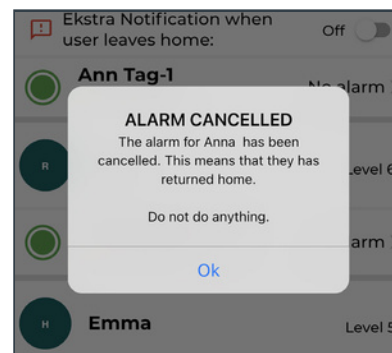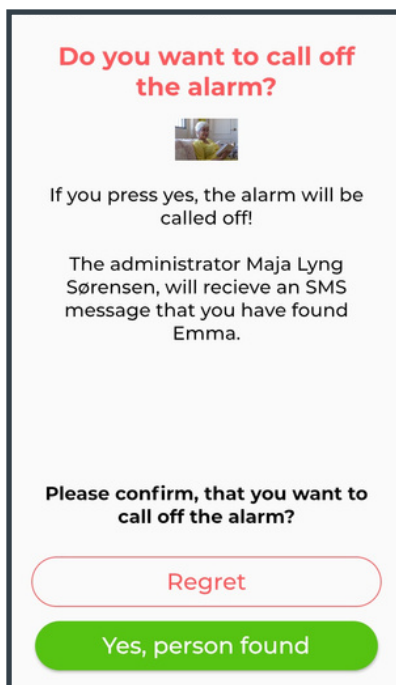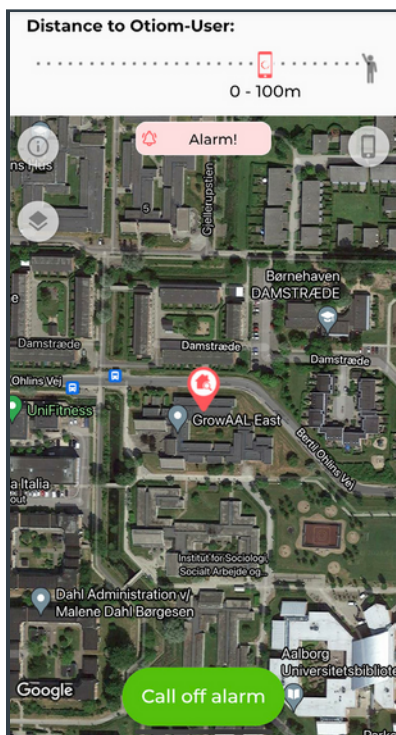



# Leia inimene Otiomi rakendusega (väljaspool turvatsooni)

## Kuidas kasutada nuppu "Aktiveeri häire"?

Nuppu kasutatakse ainult hädaolukordades (1). Kui inimene on turvatsoonis, kuid sul on vaja ta leida, saad sundida Otiomi häire aktiveeruma. Nupp on nähtav ainult siis, kui Otiomi nupp on "Väljaspool kodu, turvatsoonis" (2).

Näide häirenupu kasutamisest: kui inimene on turvatsoonis, kuid tal on vaja minna arsti juurde ja ta on selle unustanud, saab abistaja manuaalselt häire käivitada. Mõne aja möödudes hakkab abistaja saama asukohapunkte, nagu tavaliselt häire aktiveerimisel.

Otiomi nupu olek on "Väljaspool kodu, turvatsoonis", kui rakenduses kuvatakse nuppu kollasena. Kui soovid siiski dementsusega inimest leida, klõpsa kollasele väljale (3). Seejärel vajuta "Aktiveeri häire" (1), et saada Otiomi häirenupu asukoht.

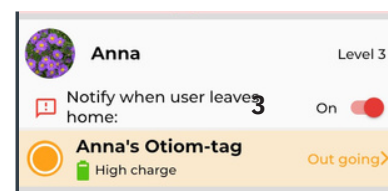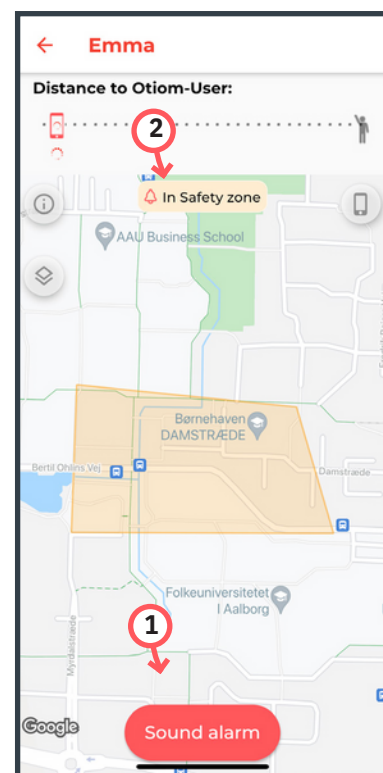

Häire on nüüd aktiveeritud. Rakendusel võib kuluda kuni 5 minutit, enne, kui see hakkab kuvama Otiomi häirenupu asukohta. See sõltub valitud ohutustasemest. Leia inimene ja tühista häire.



 Asukoht: viimane asukoht (1).

### Varasemad asukohad

Otiomi nupu varasemad asukohad näitavad liikumissuunda. Kaardil kuvatakse korraga 0-4 punkti (2).

### Kui inimene on leitud


Kinnita, et oled inimese leidnud, klõpsates "Jah, inimene on leitud" (3). Rakenduses kuvatakse Otiomi nupp nüüd olekus "Väljaspool kodu, turvatsoonis", kuni nupp tuuakse tagasi kodubaasi lähedusse.

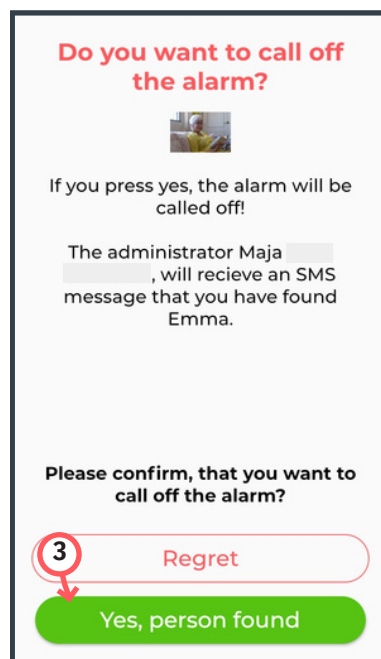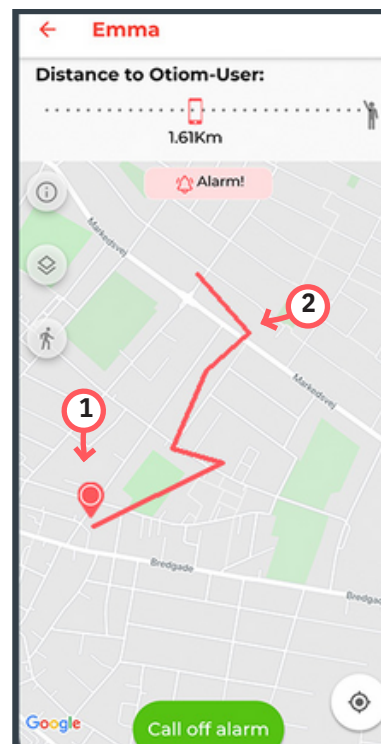

# Leia vajadusel inimene hooldusasutuses

## Leia inimene hooldusasutuse sees

Ava Otiomi rakendus ja klõpsa isikul või nupul, keda soovid otsida (1). Leheküljel 8 näed, kuidas lähedusandur töötab. Märkus: lähedusandur mõõdab nupu Bluetooth-signaali. Signaali võivad blokeerida sein, metall, talvejope jne. Otiomi nupp võib olla 1 meetri kaugusel, isegi kui rakendus näitab 0-10 m.

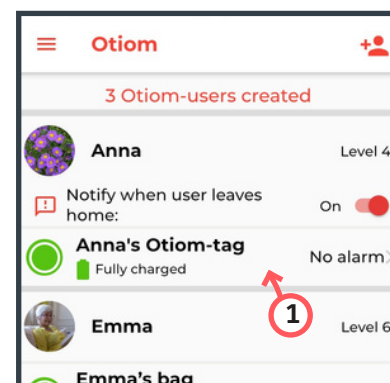


## Leia häirenupu kasutaja

### Lähedusanduri kasutamine

Lähedusandur hakkab otsima Otiomi nuppu ja mõne hetke pärast ütleb, kui kaugel sa asud Otiomi nupust (2). Näiteks, kui roheline täpp (Otiomi nupp) ja sinu nutitelefoni on 0-0,5 m kaugusel. See kehtib ainult kuni 10 km raadiuses. Kui oled rohkem kui 10 km kaugusel, siis lähedusandur ei aktiveeru.

Kui Otiomi nupp on roheline, tead, et inimene/Otiomi nupp on kodubaasi lähedal, st hooldekodus. Kui klõpsad kodubaasil, ilmub infokast (3). Siin näed, millisele kodubaasile Otiomi nupp kõige lähemal asub.

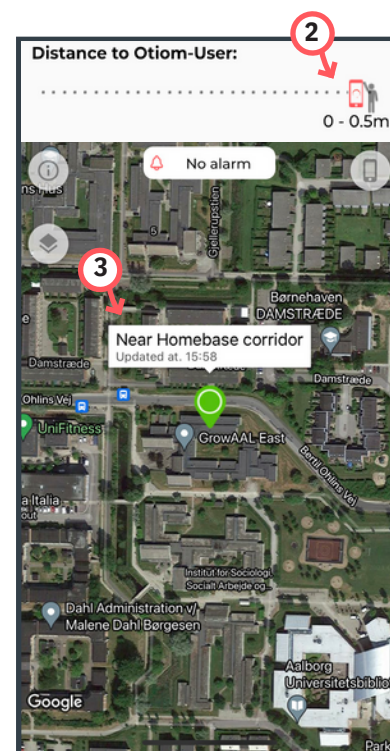

### Kui inimene/nupp on leitud

Kui oled inimese/nupu leidnud, saad lihtsalt rakenduse sulgeda või rakenduses tagasi minna, kasutades vasakus ülanurgas olevat noolt.



Otiomi häirenupp asub "kodus"



Otiomi häirenupp asub "väljaspool kodu, turvatsoonis"



Otiomi häirenupp asub "turvatsoonist väljaspool". Nupp on häireseisundis.